


RA-b-7

# マウスの結腸からの total RNA分離

## プロトコル

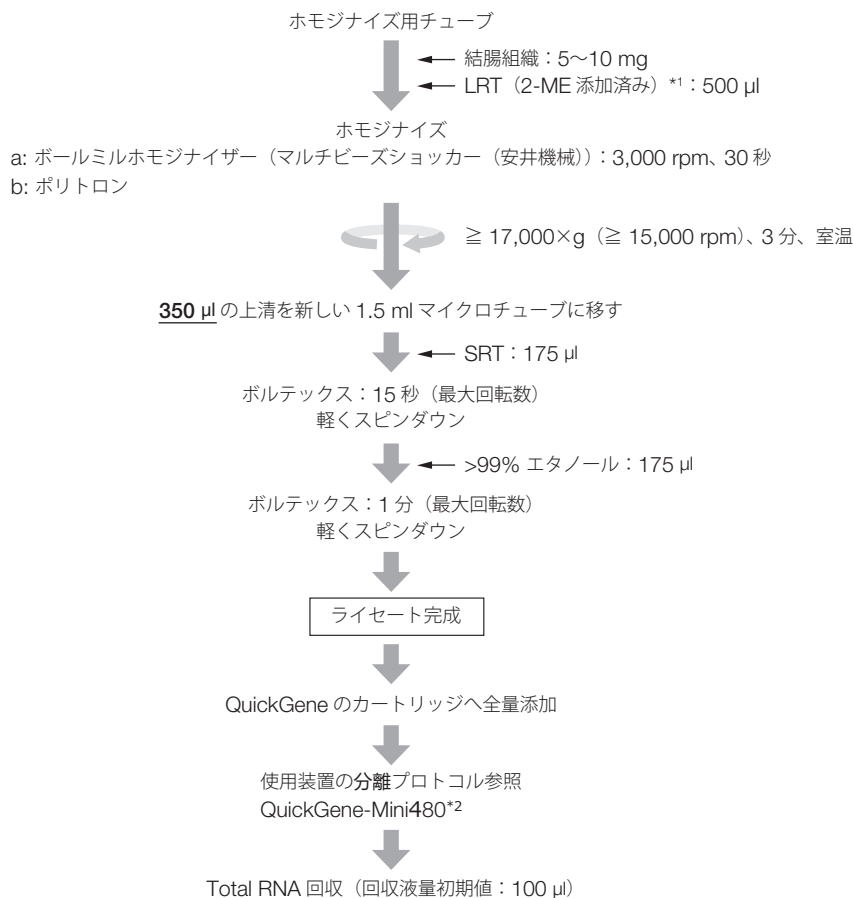

\*1 1 ml の LRT 当たり 10 µl の 2-ME を添加してください。

\*2 本事例は旧機種で取得したデータも含まれます。その他 QuickGene シリーズでもこのプロトコルをご参考頂けます。

## 結果

### 電気泳動図

データなし

### Total RNA の収量

結腸の量	収量 (µg)
a：約 5 mg	約 8.0
b：約 10 mg	3.0

### タンパク質の混入：A260/280

結腸の量	A260/280
b：約 10 mg	2.7

### カオトロピック塩の混入：A260/230

データなし

### その他

データなし

## 共通プロトコルサンプル

データなし